

放射線科受付システム

DICOM Open NetWork Solution

放射線科受付システム パクシス・アール

PAXIS-R

MWM通信でモダリティからの入力を簡単にしたい...


高価なRISではなく小規模な受付システムを構築したい...

検査の状態を院内で情報共有したい...

PAXIS-Rはそんな「したい」を実現します

『PAXiS-R(パクスィスアール)』は、放射線科における検査の「予約」→「完了」に至る患者の一連のステータスを管理し、煩雑な予約状況の管理を安価に実現できる放射線科受付システムです。

システムフロー

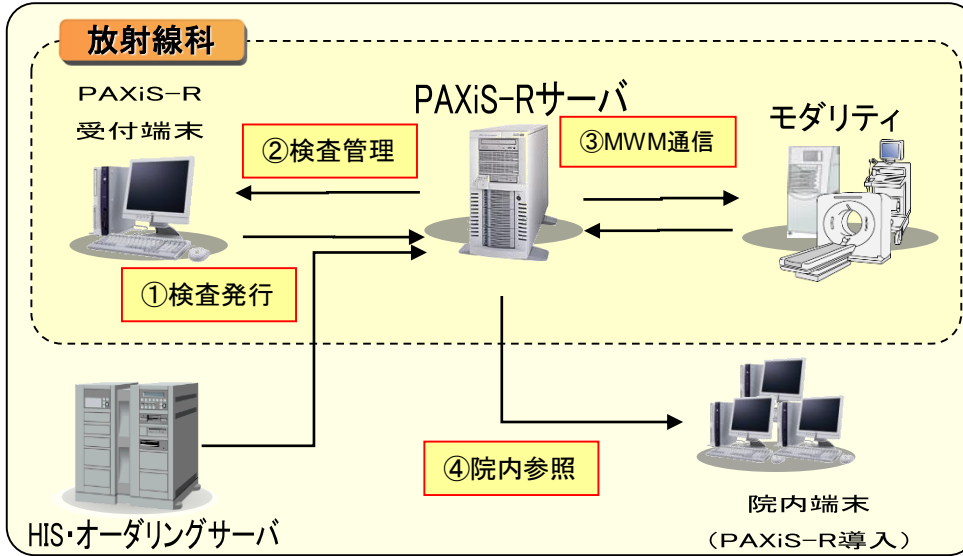

①検査発行

検査オーダーをHISやオーダーリングシステムから取得するか、PAXiS-R受付端末より発行する。

②検査管理

患者の検査進捗に合わせて、検査オーダーを管理する

③MWM通信

モダリティよりPAXiS-Proサーバにある検査オーダーを取得する

④院内参照

検査オーダーの状況を院内の端末より参照する

検査管理機能

検査オーダーを「予約」、「受付済み」、「検査開始」、「検査中」、「検査完了」の5つの状態で管理することが出来ます。

オートマッチング機能

検査オーダーと撮影検査を自動的にマッチングします。また、MWM機能がないモダリティの検査でも、手動マッチングによりマッチング候補が自動的にピックアップされるので、紐付けが簡単にできます。

※マッチング機能にはPAXiS-Proサーバが必要です



予約	受付	検査時間	患者ID	患者名	装置	検査説明	撮影部位	オーダー番号
予約	22:00	KISSEI	キッセイ 太郎	MR	CR撮影位	胸部	20080306001182	1
予約	22:00	KISSEI	キッセイ 太郎	ES	ESスクリーン	下肢	20080306001184	1

MWM機能

PAXiS-Proサーバから検査オーダーを取得することで、患者情報の入力を省くことができます。また、撮影患者の撮り違いや情報入力ミスの防止にも役立ちます。

CSV出力機能

検査オーダーの一覧を任意の条件で絞り込み、CSV形式で出力できます。院内の検査状況の統計、解析作業に役立ちます。

お問い合わせ先
 キッセイコムテック株式会社
 公共・医療ソリューション事業部
 PAXiS担当者 宛

本社/ 〒390-1293 長野県松本市和田4010-10
 TEL.0263-40-1122(代) FAX.0263-48-1284
 URL <http://www.kicnet.co.jp/>
 E-Mail dicom-support@comtec.kicnet.co.jp